

FUJIIRYōKI

家庭用

Peace Sleep

ピーススリープ

エアーマッサージ器

形名：DF-313

取扱説明書


添付文書

医療機器認証番号：221AGBZX00246000

類別：機械器具 77 バイブレーター

管理医療機器

一般的名称：家庭用電気マッサージ器（コード34662000）

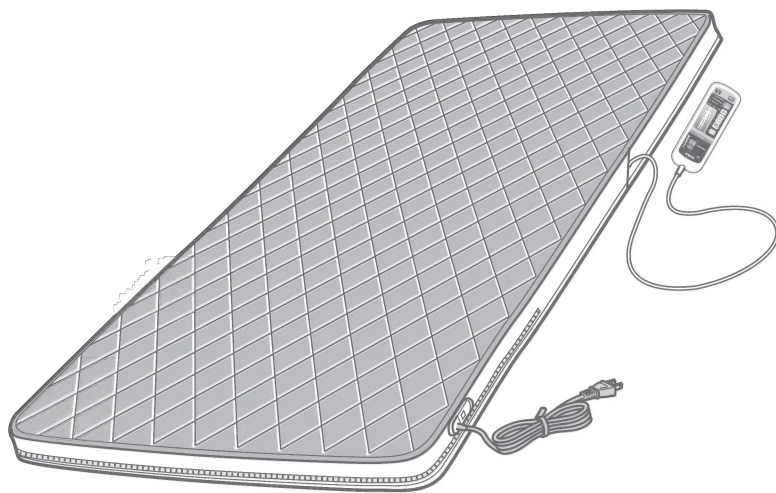

もくじ

安全上のご注意	1～4
特長	5～6
各部のなまえとはたらき	7～8
マッサージの種類と内容	9～10
ご使用の前に	11～12
マッサージを使うとき	13～19
ヒーターを使うとき	20
あとかたづけ	21
お手入れ	22
保管	23
仕様	23
修理サービスを依頼する前に	24
愛情点検	24
保証とアフターサービス	裏表紙

使用目的・効能または、効果



〔 あんま、マッサージの代用 〕
〔 一般家庭で使用する こと 〕

- このたびは、エアーマッサージ器 DF-313 をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用の前に、「安全上のご注意」（1～4ページ）を必ずお読みください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・ご購入先名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 包装に使用しているダンボールなどは、分別のうえ、リサイクルにご協力をお願いいたします。

安全上のご注意




必ずお守りください

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」・「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるかまたは、 *物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

* 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

＜絵表示の例＞

	△記号は、 警告・注意 を促す内容があることを告げるものです。 (左図の場合は一般的な警告・注意)
	⊘記号は、 禁止 の行為であることを告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、行為を 強制 したり 指示 したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

お願い

- 機器本体及び付属品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。
詳しくは、各地方自治体にお問い合わせ下さい。

警告



禁止

次のような人は付添いの人がいない場合、
使用しない

- お子様
- ご自分で意思表示のできない人
- ご自分で操作できない人
低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。

低温やけどについて

- 低温やけどは、皮膚の深部までおよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。
- 万一赤い斑点や水ぶくれができたときには直ちに専門医の診察を受けてください。



禁止

ヒーターは設定温度「4」以上で長時間
使用しない

また、同一箇所に長時間触れさせない
比較的低い温度（40～60℃）でも、長
時間、皮膚の同じ箇所に触れていると、
低温やけどのおそれがあります
次の人がお使いのときは、まわりの人が
特に気をつけてください

- お子様、お年寄り、ご病人、ご自分で温度調節ができない人
- 皮膚や皮膚感覚の弱い人
- 眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された人
- 深酒・疲労の激しい人
- 血行障害（糖尿病など）の人
- 医師より注意を受けている人

⚠ 警告



禁止

次の人は、使用しない

身体に異常が起こる場合があります。

- 医師からマッサージを禁じられている人
(例：血栓症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)



確認する

ご使用前に布団の布地に破れがないか確認する (小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼して下さい)

布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。



分解禁止

分解・改造・修理をしない また、内部カバーのファスナーを開けない

火災や感電・けがの原因になります。



医師に相談

次の人は、必ず医師と相談のうえ使用する 身体に異常が起こる場合があります。

- 悪性しゅよう(腫瘍)のある人
- 妊娠中の人または、出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)を骨折している人、急性疾患(疼痛性)のある人
- 皮膚に創傷のある人
- 体温38℃以上(有熱期)の人
(例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)
- 捻挫、肉離れなど炎症性の人
- 心臓に障害のある人
- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- 背骨(脊椎)に異常のある人や曲がっている人
- 知覚障害の人
- 貧血症の人
- かつて治療を受けたところまたは、疾患部へ使用する人
- 安静を必要とする人
- 温度感覚喪失が認められる人
- 高血圧の人
- 不整脈のある人
- 喘息の人
- 睡眠時無呼吸症の人
- 上記以外に特に身体に異常を感じている人



禁止

浴室など湿気の多い場所で使用したり、保管しない

感電や火災・故障・カビの原因になります。



禁止

子供だけで使わせたり、自分で意思表示 出来ない人には使用させない また、幼児を近づけない

感電やけがの原因になります



禁止

交流100V以外は使用しない

火災や感電の原因になります。



禁止

不安定なベッド、台、布団などの上では 使用しない

事故や故障の原因になります。
凹凸のない水平な場所で使用してください。



禁止

本体を折りたたんだり、丸めたり、身体 に巻き付けて使用しない

低温やけどや事故・故障の原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが破損したり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない
電源コードや電源プラグが破損した場合、ご購入先または「お客様相談窓口」に修理を依頼する
そのまま使い続けると感電やショート・火災の原因になります。



プラグを
抜く

動かなくなったり異常がある場合はすぐに電源プラグを抜いて、ご購入先に点検・修理を依頼する

感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。



禁止

電源コードを傷めない

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物を載せたりしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



プラグを
抜く

おねしょ等で本体が濡れた場合は、すぐに電源プラグを抜く

漏電やショートなどによる火災・感電の原因になります。ご購入先に点検・修理を依頼してください。

⚠ 注意



禁 止

駆動部や制御部に頭を載せて使用しない
気分が悪くなったり、けがの原因になります。
頭部側と足元側を逆にして使用しないでください。



禁 止

電源プラグは確実に最後まで差し込み、ピンやごみを付着させない
感電やショート・発火の原因になります。



禁 止

本体を干す場合は、もの干し竿などに干さない
落下によるけがや故障の原因になります。



禁 止

湯たんぽ、電気こたつ、電気あんか、その他の暖房器具と併用し、高温になる状態での使用はしない
火災や変形、変色、故障の原因になります。
本体内部の保護装置が動作し、通電を停止することがあります。
この場合、約2時間後に復帰します。



禁 止

ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない
火災や故障の原因になります。



禁 止

本体やリモコンに水やお茶をこぼさない
感電や故障の原因になります。
万一、こぼしたときは使用を中止し、ご購入先に点検・修理を依頼してください。



禁 止

本体を無理に引っ張ったり、刃物やとがった物で突きさしたりしない
けがや故障の原因になります。



禁 止

**本体の上に飛び乗ったり、遊んだりしない
また、人が立った状態では使用しない**
転倒してけがの原因になります。



禁 止

脚枕、駆動部、制御部、バイブレータ、リモコンを踏みつけたり、腰掛けたりしない
けがや破損・故障の原因になります。



禁 止

リモコンコード、電源コードに足を引っ掛けないように気をつける
けがのおそれがあります。



禁 止

本体内部の脚枕、駆動部、制御部につまづかない
けがの原因になります。



禁 止

リモコンや本体に重い物を置いたり、落としたり、強い衝撃を与えない
感電や火災・故障の原因になります。



禁 止

ヒーターは犬や猫などのペットの暖房用には使用しない
ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になります。



禁 止

頭部に髪飾りなどの固い物をつけて使用しない
けがのおそれがあります。



禁 止

ベンジン・シンナー・アルコールなどでふいたり、殺虫剤をかけない
感電や引火の原因になります。



禁 止

本機をご使用になりながら他の治療器を同時に使用しない



禁 止

マッサージの目的以外には使用しない
故障や事故の原因になります。



禁 止


2人以上で使用しない
故障やけがのおそれがあります。

⚠ 注意

 <p>禁止</p> <p>マッサージ中にうつぶせで使しない 内臓を圧迫する使用方はしないでください。 事故や体調不良の原因になります。</p>	 <p>医師に相談</p> <p>使用中に身体に異常が現れたり、感じたときには、直ちに使用を中止し医師に相談する</p>
 <p>ぬれ手禁止</p> <p>ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因になります。</p>	 <p>確認する</p> <p>しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常に動作することを確認してから使用する 事故やけがのおそれがあります。</p>
 <p>禁止</p> <p>飲酒後の使用はしない 事故やけがのおそれがあります。</p>	 <p>確認する</p> <p>操作スイッチ、タイマーなどが正常に動作することを確認する 事故や故障の原因になります。</p>
 <p>禁止</p> <p>食後すぐに使しない 気分が悪くなることがあります。</p>	 <p>15分以内</p> <p>マッサージは1回15分以内にする 長時間のご使用は筋肉や神経を傷める原因になります。 1日の使用は30分以内になしてください。</p>
 <p>禁止</p> <p>本体に人や物を乗せて移動させない けがや故障の原因になります。</p>	 <p>刺激を弱める</p> <p>マッサージが強すぎると感じたときは刺激を弱めるか、使用を中止する 強すぎるマッサージは筋肉や神経を傷める場合があります。</p>
 <p>禁止</p> <p>子供に本体の上で遊ばせない けがや故障の原因になります。</p>	 <p>プラグを抜く</p> <p>異常な臭いがしたり、異常音がしたり、発煙したときは、直ちに電源プラグをコンセントから抜く そのまま使用すると、火災の原因になります。 ご購入先に点検・修理を依頼してください。</p>
 <p>禁止</p> <p>付属品以外は使しない 故障の原因になります。</p>	 <p>プラグを抜く</p> <p>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く また、濡れた手で抜き差ししない 感電やけがのおそれがあります。</p>
 <p>禁止</p> <p>本体は、洗わない 故障や感電・火災の原因になります。</p>	 <p>プラグを抜く</p> <p>使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。</p>
 <p>禁止</p> <p>マッサージの使用中は眠らない 無意識での使用は、体調不良の原因になります。</p>	 <p>プラグを抜く</p> <p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く 感電やショートして発火することがあります。</p>
 <p>医師に相談</p> <p>使用しても効果が現れない場合、医師または、専門家に相談する</p>	 <p>プラグを抜く</p> <p>停電のときは直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く 再通電されたとき事故の原因になります。</p>

特 長


エアーマッサージと振動マッサージをコンパクトに内蔵した寝具タイプのマッサージ器です。

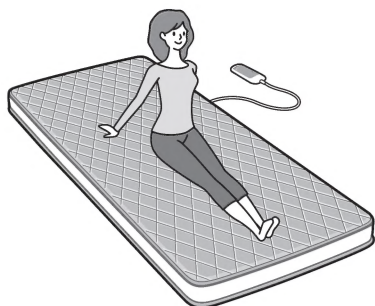


エアーマッサージには3種類の「自動コース」と、2種類の「好みコース」さらに「脚枕コース」があります。

全身対応マッサージ！

- おやすみ前
- おめざめ後
- ゆったり
- 好みひねり
- 好みストレッチ
- 脚枕

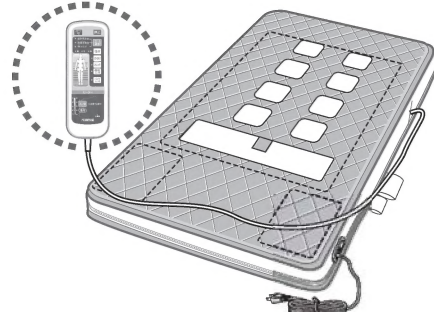


「ふくらはぎ」から「背」まで全身対応のマッサージ器です。

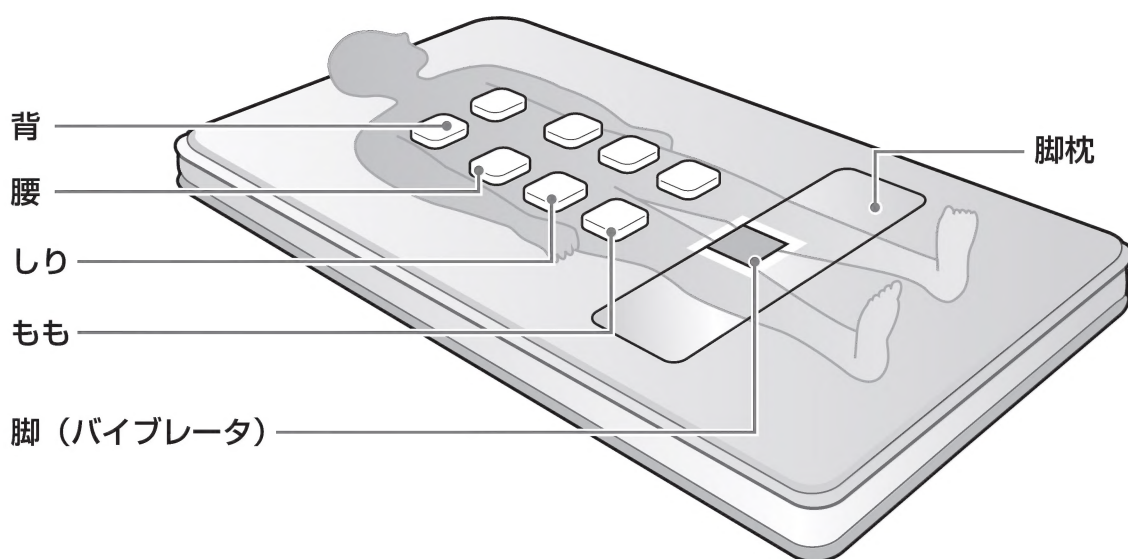


多彩な「ひねり」と「ストレッチ」で全身をマッサージします。

背ストレッチ

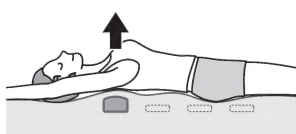


上側2箇所ストレッチ

腰ストレッチ

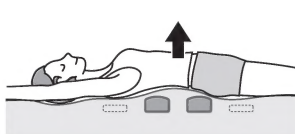


下側4箇所ストレッチ

背筋ひねり

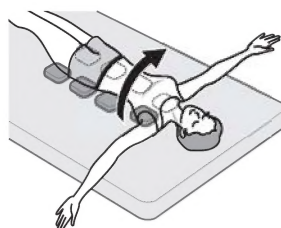


片側全体がひねられます

背腰対角ひねり

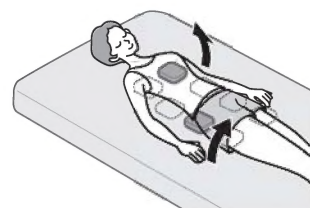


背中と腰が対角にひねります

表示が見やすく、使いやすいリモコンです。

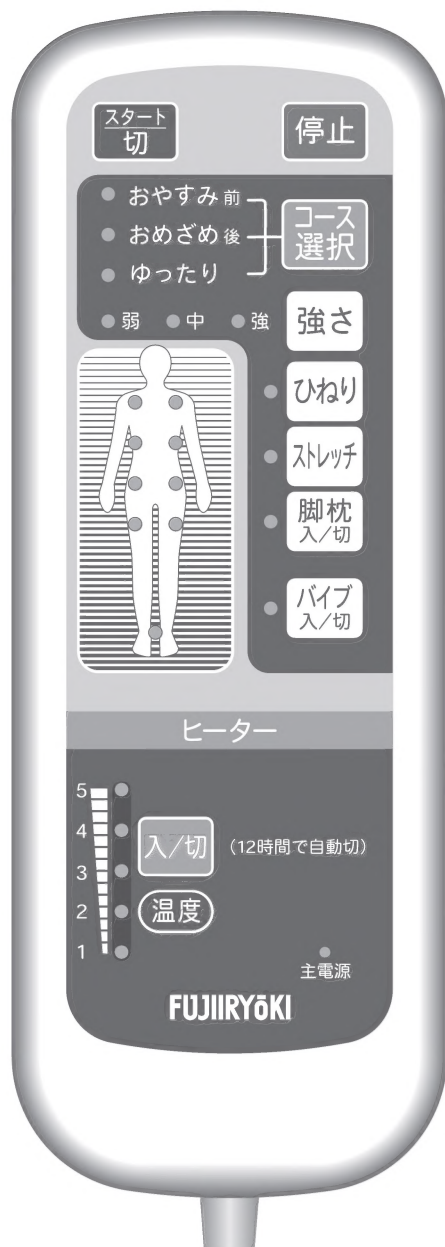

温度調整ができるヒーター付きです。

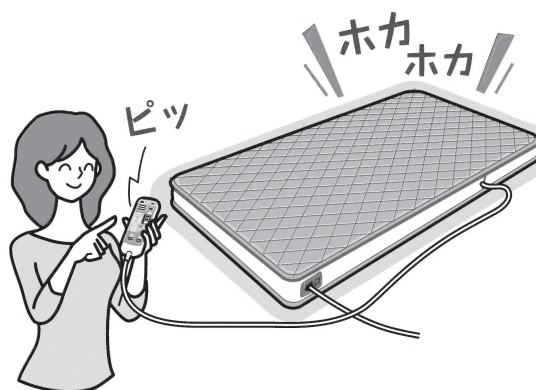

使用目的、効能又は効果


あんま・マッサージの代用
一般家庭で使用するこ




各部のなまえとはたらき

本体

使用状態

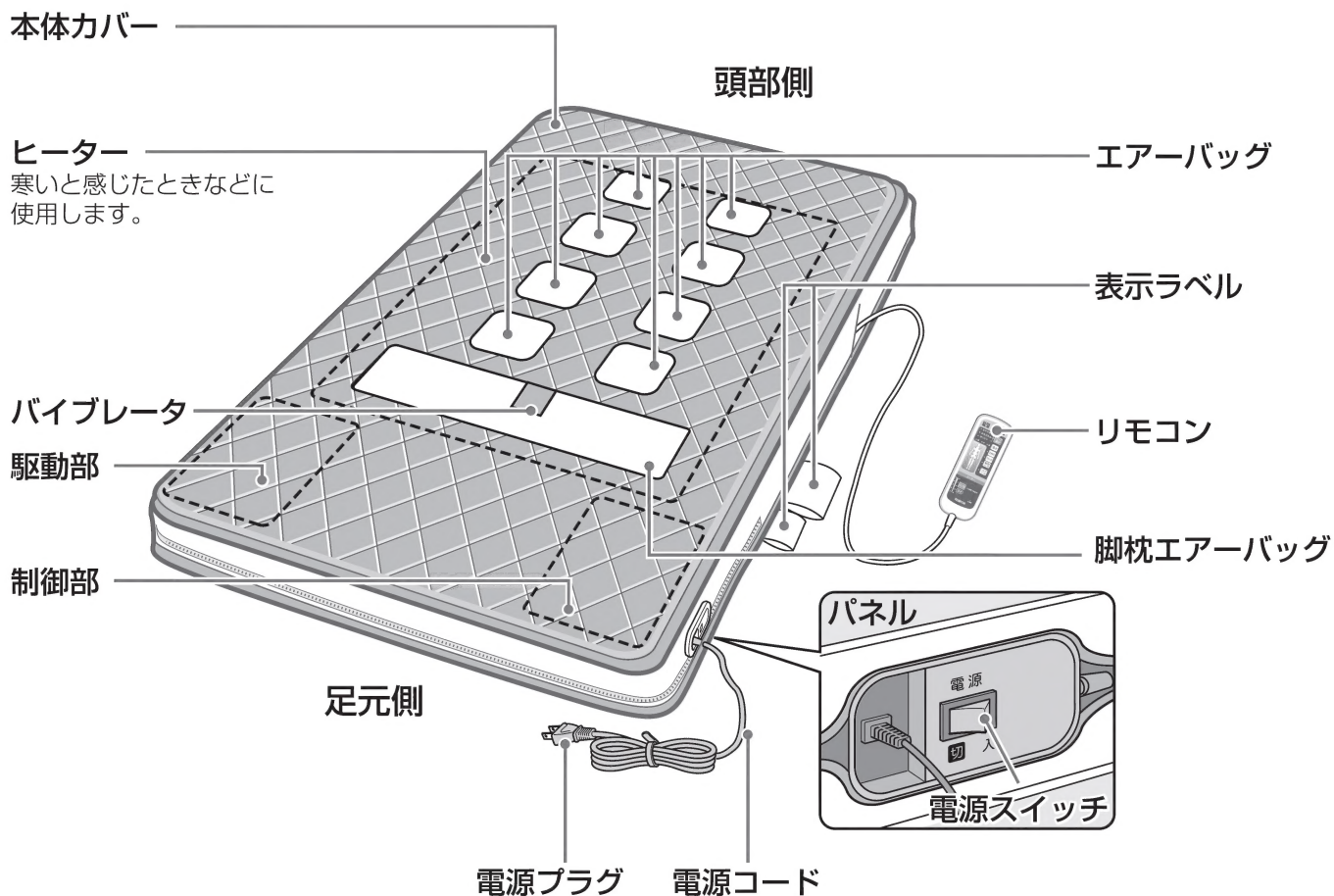

折りたたみ状態

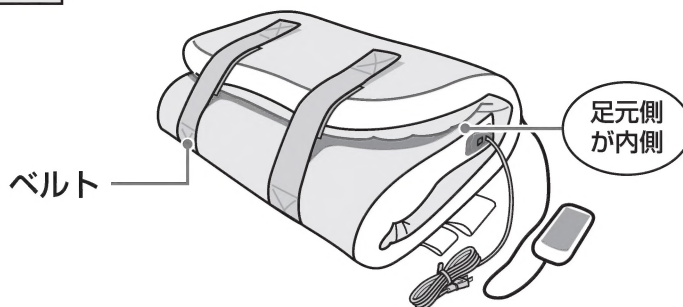

付属品

専用シート (CF-10PU)

この専用シートはご家庭で洗濯できます。
※消耗性部品

リモコン

スタート／切ボタン

エアーマッサージの「入／切」を切り替えます。

13 15 19

コース表示ランプ

選択されたコースが点灯します。

9 14

強さ表示ランプ

選択された強さが点灯します。

14 16

マッサージ動作位置ランプ

マッサージ部位が点滅します。

停止ボタン

ただちにすべての動作を止めます。

13 15 19

コース選択ボタン

「おやすみ前」「おめざめ後」「ゆったり」の3種類のコースが選べます。

9 14

強さ選択ボタン

「弱」「中」「強」のマッサージ強さが選べます。

14 16

ひねりボタン

ひねりのマッサージが選べます。

10 15

ストレッチボタン

ストレッチのマッサージが選べます。

10 15

脚枕

入／切ボタン

脚枕の「入／切」を切り替えます。

表示ランプ

脚枕が動作すると点灯します。

10 17 19

バイブレータ

入／切ボタン

バイブレータの「入／切」を切り替えます。

表示ランプ

バイブレータが動作すると点灯します。

10 17 19

ヒーター

入／切ボタン

ヒーターの「入／切」を切り替えます。

設定温度ランプ

選択されたヒーターの設定温度を表示します。

温度設定ボタン


押すごとに5段階の設定温度が選べます。

20

主電源ランプ

電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを入ると点灯します。

12

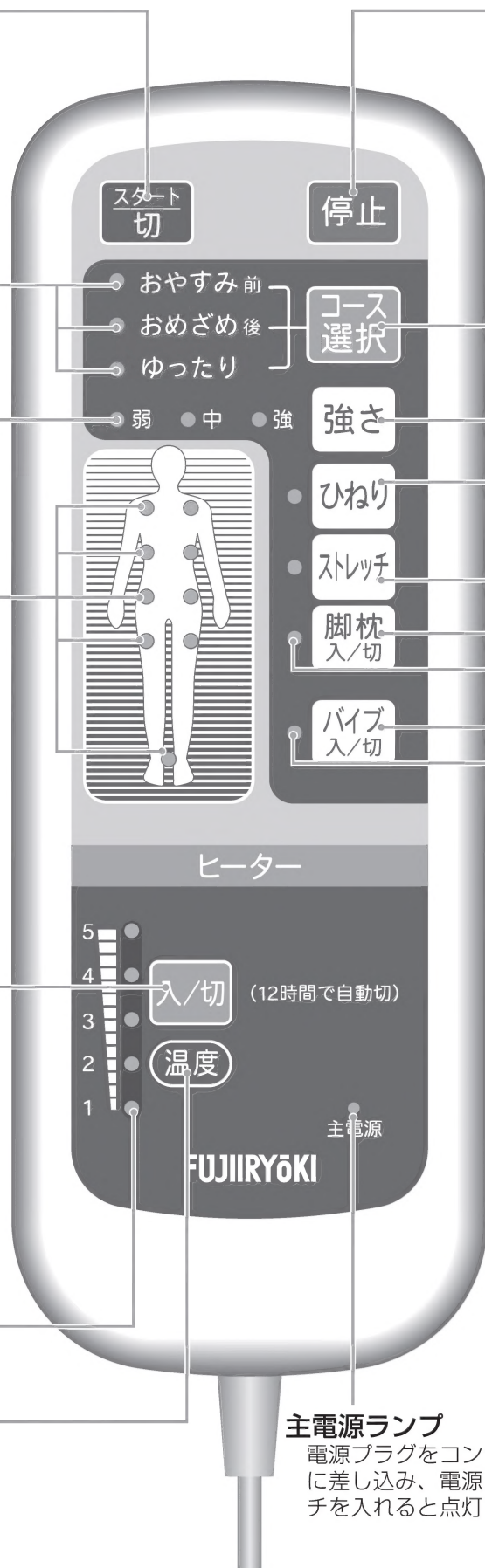

マッサージの種類と内容

「自動コースマッサージ」「お好みコースマッサージ」「脚枕マッサージ」「振動マッサージ」があります。

自動コースマッサージ

コース選択ボタン


コース 選択

ボタンを押すたびに、
「おやすみ前」「おめざめ後」「ゆったり」
が切り替わります。

●おやすみ前

睡眠の前に


足元から上半身へのストレッチマッサージ
により下半身の血行を促進して疲れを癒す
コースです。

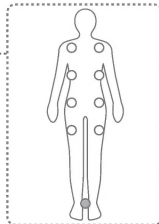

●おめざめ後

睡眠から目覚めたあとに


上半身から足元へのストレッチマッサージ
によりお目覚め後の使用に適したコースで
す。

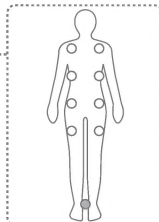

●ゆったり


ゆっくり、リラックスしたい時

筋肉のコリを解きほぐすストレッチマッ
サージとひねりを組み合わせたコースです。

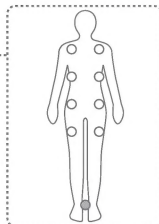

マッサージ使用時のお願い

マッサージは、定格時間30分を超えて使用しないでください。この製品には加熱保護装置があり、30分以上の連続使用や高温の場所での使用の場合、マッサージの動作を停止します（このときリモコンの表示はそのままです）が故障ではありません。このようなときは電源コードを抜き、冷えるまで約2時間お待ちください。加熱保護装置が解除され、再び使用できます。

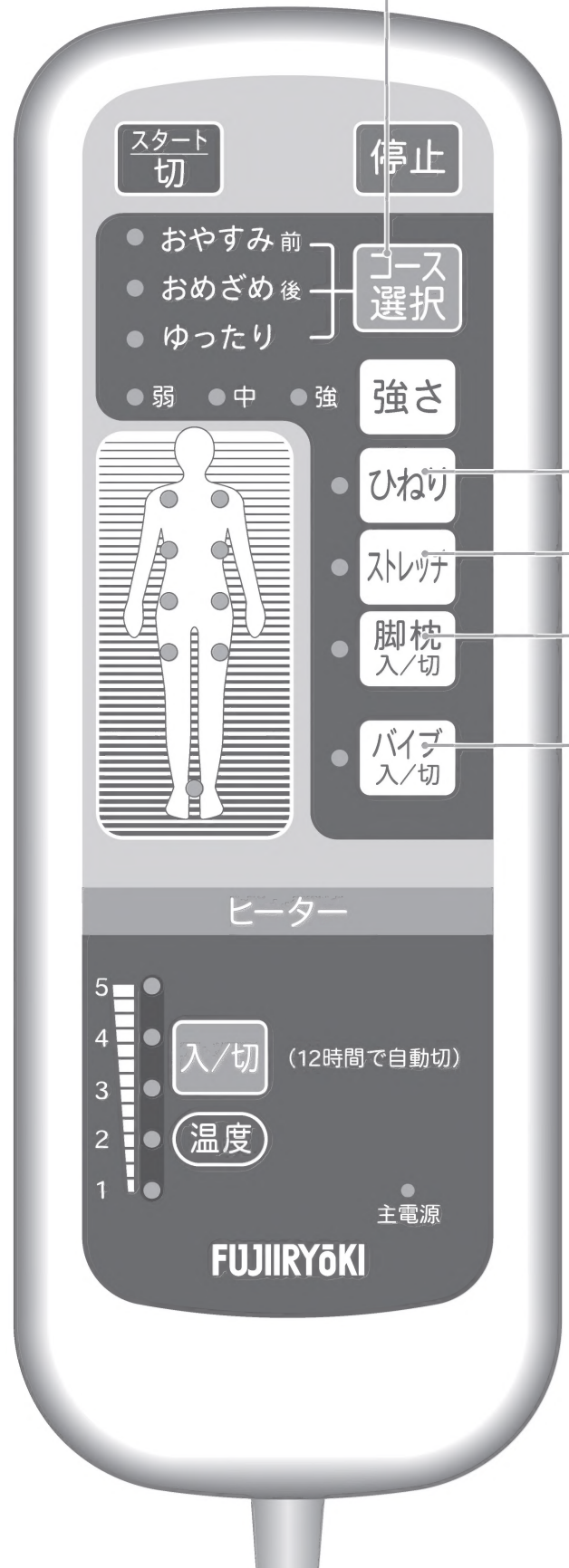

お好みコースマッサージ


「ひねり」ボタンまたは「ストレッチ」ボタンでお選び頂きます。

ひねりボタン

ひねり

●ひねり

体をひねる動作を重点的に取り入れたコースです。

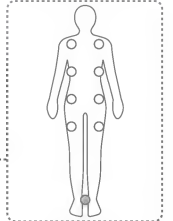


ストレッチボタン

ストレッチ

●ストレッチ

体をストレッチさせる動作を重点的に取り入れたコースです。

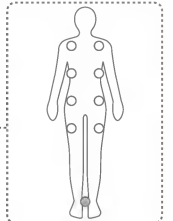

脚枕マッサージ

脚枕ボタン

脚枕
入/切


ボタンを押すたびに、
脚枕「入」「切」が切り替わります。

●脚枕単独マッサージ

脚枕のみで「入」にすると脚枕の膨縮を繰り返し、
脚をゆっくり上げ下げします。
マッサージ終了後、脚枕が縮み脚を下げます。

●自動・お好みコース脚枕同時

自動コース・お好みコース動作中に脚枕が「入」されると
コース動作を一時停止し、脚枕が膨らみ脚を上げ、コース
動作が再び始まります。コース動作中、脚枕は上がったまま
の状態になります。
マッサージコース終了と同時に脚枕が縮み脚を下げます。

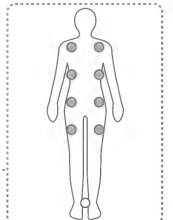


脚バイブレータ マッサージ

バイブボタン

バイブ
入/切

ボタンを押すたびに、
バイブレータの「入」「切」が切り替わります。

強さがゆるやかに増加する振動マッサージをします。

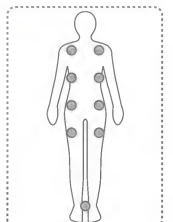

ご使用の前に

- 折り曲げたまま使用しないでください。
- しばらく使用しなかった後使用するときは、正常に作動することを確認してから使用してください。

警告



禁止

不安定なベッド、台、布団などの上では使用しない

事故や故障の原因になります。
凹凸のない水平な場所で使用してください。





禁止

浴室など湿気の多い場所で使用したり、保管しない


感電や火災・故障・カビの原因になります。

1 本体を広げる

上向きに寝たときに、電源コードのある方を足元にする

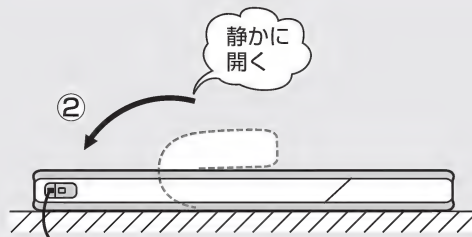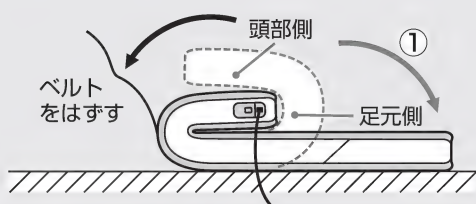

- 折れぐせが残っていることがありますが、使用することにより徐々に直ります。

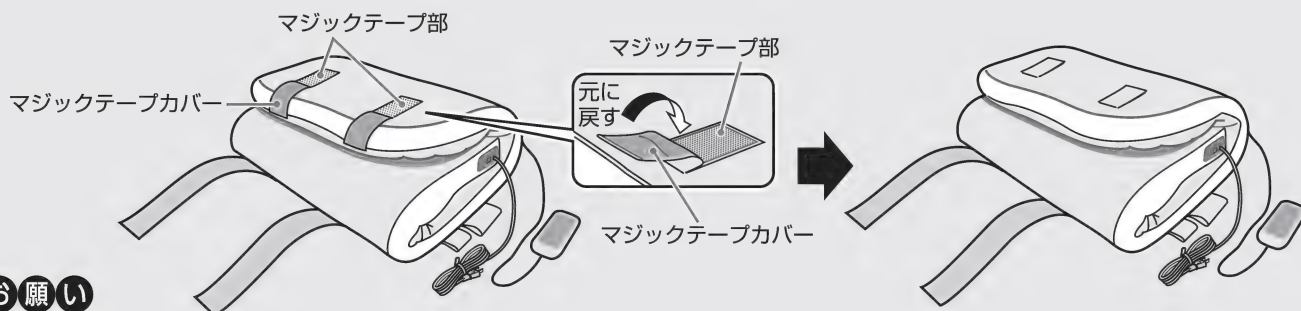


お願い


- ベルトをはずした後は、本体を広げる前にマジックテープを必ず元に戻してください。また、ベルトを掛けるときはマジックテープカバーをはずしてください。

設置場所について

- 本体は凹凸のない平らな床や畳の上に直接、水平に置いてください。
マッサージの動作に支障をきたして故障の原因となります。

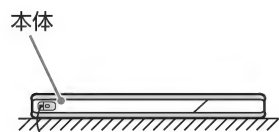

平らな床の上または畳の上

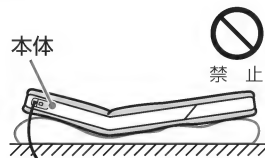

不安定な状態

- 無理に折り曲げた状態では使用しないでください。

⚠ 注意



確認する

ご使用前に布団の布地に破れがないか確認する
(小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼して下さい)

布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。



禁止

ストーブなど火気の近くで使用したり、
たばこを吸いながら使用しない

火災や故障の原因になります。

2 電源を入れる

①電源プラグをコンセントに差し込む



②電源スイッチを入れる

- 電源スイッチは本体足元左側面にあります。



- リモコンの主電源ランプが点灯します。



主電源ランプ

3 本体に横たわる

①本体の頭側を確認して本体に横たわる



マッサージを使うとき（自動コース）

マッサージをするときは、本体の中央に寝てください。
正常に動作しなかったり、故障の原因となります。

⚠ 注意



15分以内

マッサージは1回15分以内にする

長時間のご使用は筋肉や神経を傷める原因になります。1日の使用は30分以内にしてください。



医師に相談

使用中に身体に異常が現れたり、感じたときには、直ちに使用を中止し医師に相談する



プラグを抜く

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く

ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。

メモリー機能について

- 「スタート／切」で途中で終了した場合、前回使用したエアーマッサージの「コース選択」「強さ」が記憶されます。再度「スタート／切」でマッサージを始めると、前回使用した「コース選択」「強さ」でマッサージが開始します。

メモリー機能がはたらかない場合

- 「停止」で終了した場合。
- 電源スイッチを「切」にした場合。
- 電源プラグをコンセントから抜いた場合。

エアーマッサージを使うとき

1 エアーマッサージの電源を入れる



「スタート／切」ボタンを押す

- ブザーがピッと鳴り、コース「おやすみ前」強さ「弱」のランプが点灯します。
- 何も押されずに約3秒経過すると自動的にコース「おやすみ前」、強さ「弱」でマッサージが始まります。

途中で終了したいとき



「スタート／切」ボタンを押す

ただちにすべての動作を止めたいとき



「停止」ボタンを押す

- 「停止」を押すと、ヒーターも切れますのでご注意ください。

お知らせ


- 使用途中で電源スイッチを切るとエアーバッグが膨らんだままになることがあります。
電源スイッチをもう一度入れ、エアーバッグが縮んだのを確認してから電源スイッチを切ってください。
- 「停止」ボタンを押した後、約2秒間、すべてのボタンを受付けません。
約2秒経過後、「スタート／切」を押すとエアーマッサージ動作に戻ります。

マッサージの動作時間

- 自動コースの動作時間は約15分です。

オートタイマー機能について

- マッサージ開始後、約15分で自動的にマッサージが停止します。
 - マッサージ途中で下記の操作をしたとき、タイマーは「15分」から再スタートし、約15分で自動的にマッサージが停止します。
 - ・自動コース内での切り替え
 - ・自動コースからお好みコース(ひねり、ストレッチ)への切り替え
 - ・お好みコース(ひねり、ストレッチ)から自動コースへの切り替え
 - ・お好みコース(ひねり、ストレッチ)の切り替え
 - ・脚枕から自動コース、お好みコース(ひねり、ストレッチ)への切り替え
- ※また、マッサージ開始後連続で最大30分になると自動的にマッサージが停止します。

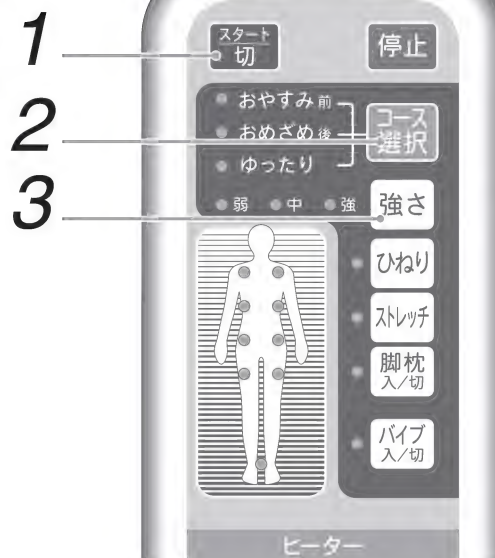


2 お好みのエアーマッサージモードを選ぶ

自動コースマッサージを使うとき

コース 選択 「コース選択」ボタンを押し、お好みのコースを選ぶ


- 「コース選択」ボタンを押すたびに「おやすみ前」→「おめざめ後」→「ゆったり」の順で切り替わります。但し、切り替えに数秒かかることがあります。
- 選択したコースの表示ランプが点灯し、マッサージを行っている位置が点滅します。
- 「コース選択」はあらかじめ「おやすみ前」に設定されています。

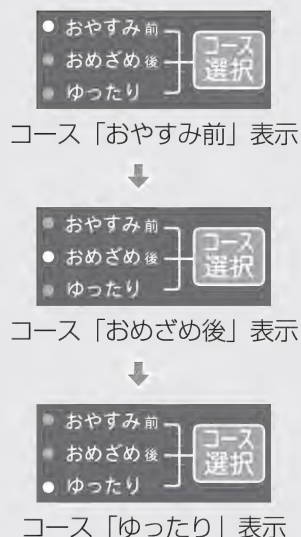

3 エアーマッサージの強さを選ぶ

強さ 「強さ」ボタンを押し、お好みの強さを選ぶ

- 「強さ」ボタンを押すたびに「弱」→「中」→「強」の順で切り替わります。但し、切り替えに数秒かかることがあります。
- 選択した「強さ」の表示ランプが点灯します。
- 「強さ」はあらかじめ「弱」に設定されています。

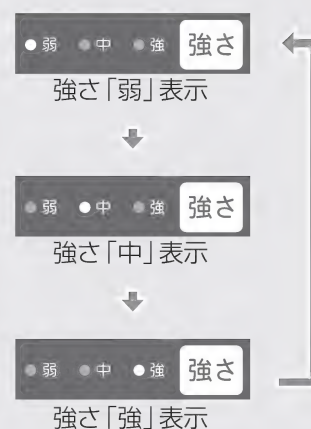

マッサージを使うとき（お好みコース）

マッサージをするときは、本体の中央に寝てください。
正常に動作しなかったり、故障の原因となります。

⚠ 注意



15分以内

マッサージは1回15分以内にする

長時間のご使用は筋肉や神経を傷める原因になります。1日の使用は30分以内にしてください。



医師に相談

使用中に身体に異常が現れたり、感じたときには、直ちに使用を中止し医師に相談する



プラグを
抜く

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く

ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。

エアーマッサージを使うとき

1 エアーマッサージの電源を入れる



「スタート／切」ボタンを押す

- ブザーがピッと鳴り、コース「おやすみ前」強さ「弱」のランプが点灯します。
- 何も押されずに約3秒経過すると自動的にコース「おやすみ前」、強さ「弱」でマッサージが始まります。

途中で終了したいとき



「スタート／切」ボタンを押す

ただちにすべての動作を止めたいとき



「停止」ボタンを押す

- 停止を押すと、ヒーターも切れますのでご注意ください。

お知らせ


- 使用途中で電源スイッチを切るとエアーバッグが膨らんだままになることがあります。
電源スイッチをもう一度入れ、エアーバッグが縮んだのを確認してから電源スイッチを切ってください。
- 「停止」ボタンを押した後、約2秒間、すべてのボタンを受付けません。
約2秒経過後、「スタート／切」を押すとエアーマッサージ動作に戻ります。

マッサージの動作時間

- お好みコースの動作時間は約15分です。

オートタイマー機能について

- マッサージ開始後、約15分で自動的にマッサージが停止します。
 - マッサージ途中で下記の操作をしたとき、タイマーは「15分」から再スタートし、約15分で自動的にマッサージが停止します。
 - ・自動コース内での切り替え
 - ・自動コースからお好みコース(ひねり、ストレッチ)への切り替え
 - ・お好みコース(ひねり、ストレッチ)から自動コースへの切り替え
 - ・お好みコース(ひねり、ストレッチ)の切り替え
 - ・脚枕から自動コース、お好みコース(ひねり、ストレッチ)への切り替え
- ※また、マッサージ開始後連続で最大30分になると自動的にマッサージが停止します。

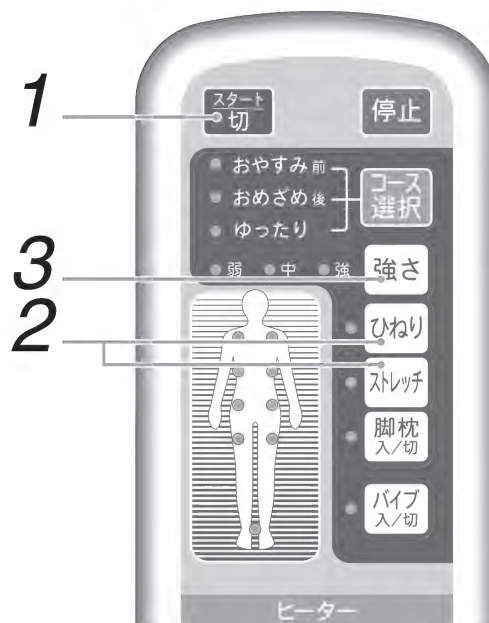


2 お好みのエアーマッサージモードを選ぶ

お好みコースマッサージを使うとき


ひねり 「ひねり」または「ストレッチ」ボタンを押し、お好みコースを選ぶ

ストレッチ

- 選択したコースの表示ランプが点灯し、マッサージを行っている位置が点滅します。
- 「ひねり」と「ストレッチ」の切り替えに数秒かかる場合があります。

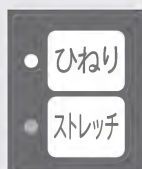

コース「ひねり」表示

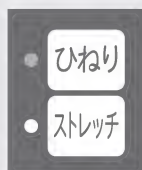


コース「ストレッチ」表示

3 エアーマッサージの強さを選ぶ

強さ 「強さ」ボタンを押し、お好みの強さを選ぶ

- 「強さ」ボタンを押すたびに「弱」→「中」→「強」の順で切り替わります。但し、切り替えに数秒かかることがあります。
- 選択した「強さ」の表示ランプが点灯します。
- 「強さ」はあらかじめ「弱」に設定されています。

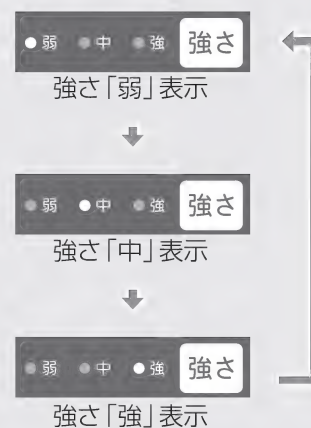

マッサージを使うとき(バイブレータおよび脚枕)

バイブレータ

バイブレータのみでも、またエアーマッサージ中でも使用できます。

お願い

- 畳や床の状態により振動や音が気になる場合は、マットなどのクッションを下に敷いてください。

脚枕

脚枕のみでも、また自動コース、お好みコースでも使用できます。

お願い

- 脚枕が膨らんだままの状態では脚枕の上に立たないで下さい。

お知らせ


- 脚枕は過度にエアーを入れすぎないように次の機能があります。
脚枕を「切」の状態にしてから再度「入」にした場合、約15秒間は「脚枕 入／切」ボタンは無効となります。無効の間は脚枕の「入／切」表示ランプが点滅します。ランプが消灯したあと、「脚枕 入／切」ボタンを押すと脚枕が「入」になります。

バイブレータおよび脚枕を使うとき

1 バイブレータの電源を入れる

バイブ
入／切


「バイブ 入／切」ボタンを押す

- バイブ  を押すたびに「入／切」が切り替わります。
- バイブレータ動作中は「入／切」表示ランプが点灯します。
- バイブレータ単独動作の場合「入」にしてから約15分で自動的に停止します。
- バイブレータ動作途中で下記の操作をしたとき、バイブレータは自動的に停止します。
 - ・バイブレータ単独動作中に「スタート／切」ボタンを押す
 - ・エアーマッサージコースとバイブレータを併用中に他のエアーマッサージコースへの変更
- バイブレータの強さを変更することはできません。



お知らせ


停止ボタンについて



-  を押すと、バイブレータが切れます。
- バイブレータにはメモリー機能はありません。

2 脚枕の電源を入れる

脚枕
入／切

「脚枕 入／切」ボタンを押す

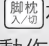
- 脚枕  を押すたびに「入／切」が切り替わります。
- 脚枕動作中は「入／切」表示ランプが点灯し、脚枕が動作している位置が点滅します。
- 脚枕単独動作の場合「入」にしてから約15分で自動的に停止します。
- 脚枕単独動作中に「スタート／切」ボタンを押すと、脚枕は自動的に停止します。

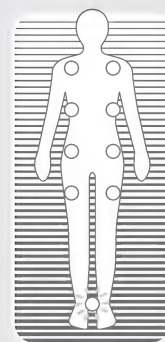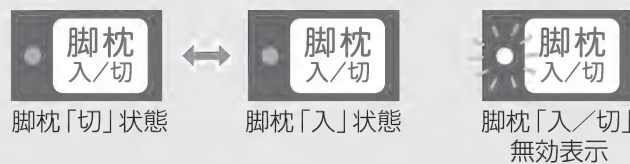

脚枕動作表示

お知らせ

停止ボタンについて

-  を押すと、脚枕の動作が止まります。
- 脚枕にはメモリー機能はありません。


バイブレータ・脚枕の動作時間

- 単独での動作時間は約15分です。

オートタイマー機能について


- 途中で下記の操作をしたとき、タイマーは「15分」から再スタートし、約15分で自動的にバイブレータおよび脚枕が停止します。
 - バイブレータ単独動作から脚枕との併用
 - 脚枕単独動作からバイブレータとの併用
 - エアーマッサージコースと脚枕を併用中に他のエアーマッサージコースへの変更
- ※ また、バイブレータおよび脚枕開始後連続で最大30分になると自動的に停止します。

2
1

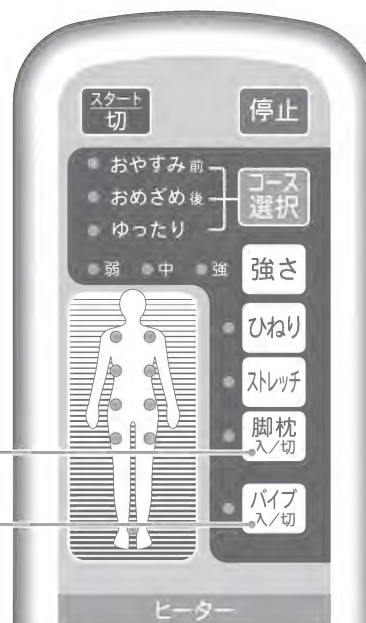


【下図の見方】 左辺の傾き が吸気動作（膨らみ）
直線の部分 が脚枕保持（膨らんだまま）
右辺の傾き が排気動作（縮む）を表しています。

自動コース及びお好みコースを選択し 脚枕が「入」の場合

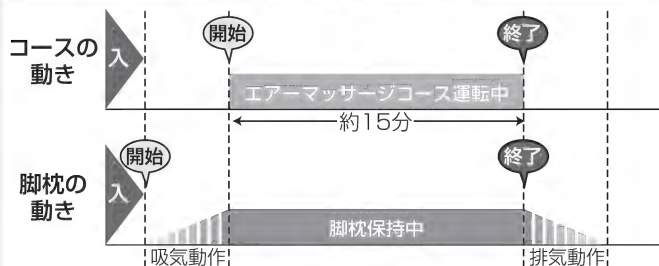


- 初めに脚枕が高くなり、その後選択されたマッサージが始まります。
- 約15分後にマッサージ停止と同時に脚枕は排気状態になります。

自動コース及びお好みコースの途中で 脚枕が「入」の場合

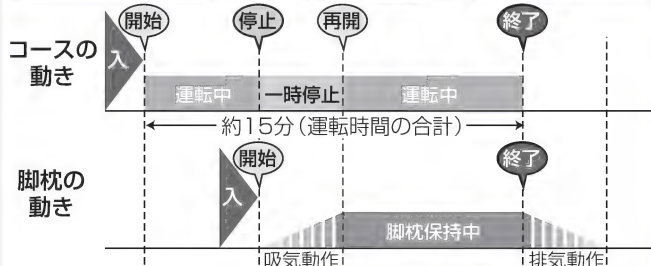


- 脚枕が「入」のところで脚枕は高くなります。その時、マッサージコースは脚枕が膨らむまで一時停止します。
- 脚枕が膨らみきったところで再度マッサージコースが始まります。
- 約15分後にマッサージ停止と同時に脚枕は排気状態になり、低くなります。

自動コース及びお好みコースの途中で 脚枕が「切」の場合

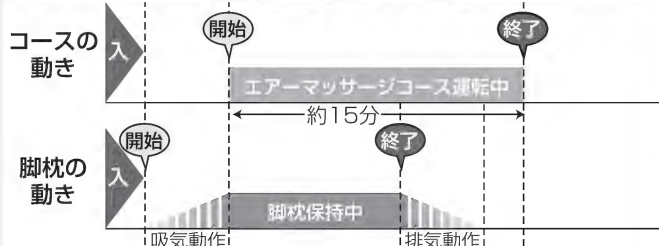

- 脚枕が「切」のところで脚枕は排気状態になり、低くなります。その時、マッサージコースは一時停止しません。

脚枕単独動作の場合

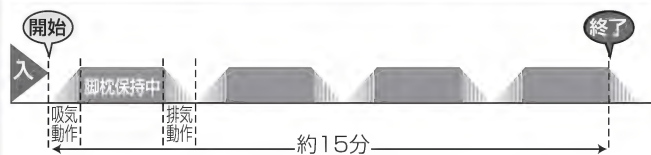

- 脚枕がゆっくり膨張を繰り返し、ふくらはぎが上下します。
- 脚枕動作中に脚枕 で脚枕を切ると、脚枕はいずれの状態でも排気状態になります。

お知らせ

- 脚枕が単独動作中に によりエアーマッサージが選択されると、脚枕は「切」になり排気状態になります。
- エアーマッサージ動作中にエアーマッサージコースが変更された場合、脚枕はコース変更前の状態を維持します。

マッサージを使うとき（使い終わったら）

⚠ 注意



プラグを
抜く

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く


ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。



プラグを
抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く

感電やショートして発火することがあります。

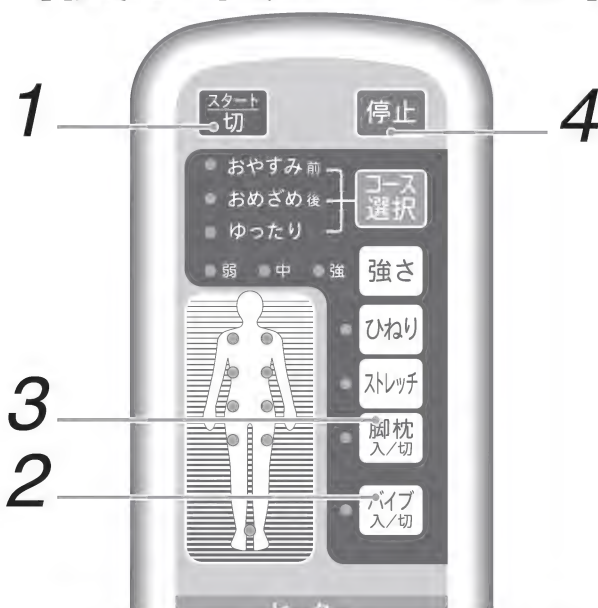

1 エアーマッサージを止める



「スタート／切」ボタンを押す

- エアーマッサージの全てのランプが消えます。

2 バイブレーションを止める



「パイプ 入／切」ボタンを押す

- バイブレーションのランプが消えます。

3 脚枕を止める



「脚枕 入／切」ボタンを押す

- 脚枕のランプが消えます。

お知らせ

- 脚枕は過度にエアを入れすぎないように次の機能があります。
脚枕を「切」の状態にしてから再度「入」にした場合、約15秒間は「脚枕 入／切」ボタンは無効となります。無効の間は脚枕の「入／切」表示ランプが点滅します。約15秒経過後、ランプが消灯します。

マッサージの動作時間

- 自動コース、お好みコースの動作時間は約15分です。

バイブレーション・脚枕の動作時間

- 単独での動作時間は約15分です。

4 ただちにすべての動作を止める



「停止」ボタンを押す

お知らせ

停止ボタンについて

- 「停止」を押すと、ヒーターも切れます。


5 電源を切る

電源スイッチを切る

- 電源スイッチは本体足元左側面にあります。
- リモコンの主電源ランプが消えます。



電源プラグを
コンセントから抜く

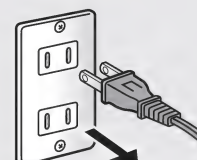

ヒーターを使うとき

ヒーターのみまたはマッサージ中でも使用できます。

警告



禁止

ヒーターは設定温度「4」以上で長時間使用しない
また、同一箇所に長時間触れさせない

比較的低い温度(40～60℃)でも、長時間、皮膚の同じ箇所に触れていると、低温やけどのおそれがあります
次の人がお使いのときは、まわりの人が特に気をつけてください

- お子様、お年寄り、ご病人、ご自分で温度調節ができない人
- 皮膚や皮膚感覚の弱い人
- 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された人
- 深酒・疲労の激しい人
- 血行障害(糖尿病など)の人
- 医師より注意を受けている人


メモリー機能について

- ヒーター「入/切」で切った場合、前回使用したヒーターの「設定温度」が記憶されます。
再度「入/切」でヒーターを入れると、前回使用した「設定温度」でヒーターが入ります。

メモリー機能がはたらかない場合

- 「停止」で終了した場合。
- 電源スイッチを「切」にした場合。
- 電源プラグをコンセントから抜いた場合。

1.3
2

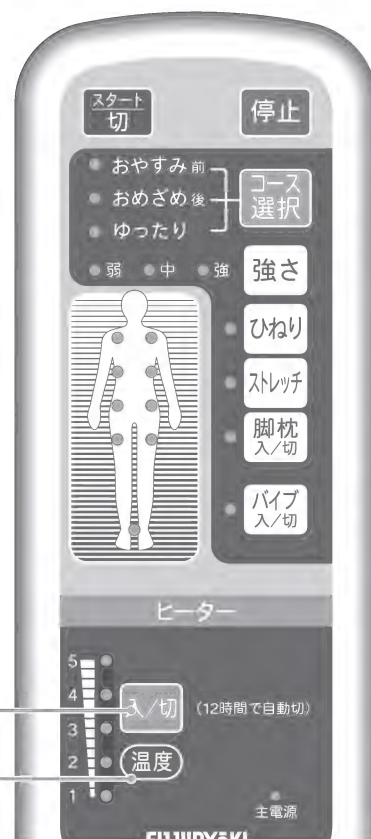

1 ヒーターの電源を入れる

入/切 ヒーター「入/切」ボタンを押す

- ヒーター「入/切」を押すたびに「入/切」が切り替わります。
- 入にしてから約12時間で自動的にオフになります。

3 使い終わったらヒーターを切る


入/切 ヒーター「入/切」ボタンを押す

電源スイッチを切る

- 電源スイッチは本体足元左側面にあります。
- リモコンの主電源ランプが消えます。



電源プラグをコンセントから抜く

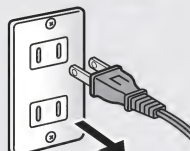


お知らせ 停止ボタンについて

- 「停止」を押すと、ヒーターが切れます。

2 温度ボタンで設定温度を選ぶ

温度 「温度」ボタンを押す

- 「温度」ボタンを押すたびに設定温度が5段階の順で切り替わります。
- 選択した設定温度のランプが点灯します。

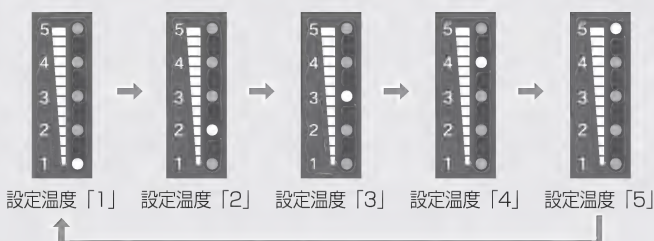

お知らせ

- 最初に設定温度「5(高)」を設定して1時間ほど本体を温めた後にお好みの温度目盛にすることをお勧めします。
- 寝汗をかいいたり、のどがかわいたり、起きたあととだるいときは、設定温度「2」以下に下げて使用します。(体温より低い温度が睡眠には適しています。)

ヒーター温度について

ご購入直後や毎年使い始めには、ぬるく感じる場合があります。これは保管中に本体が湿気を含むためにおこります。このようなときは、使用前に本体を温める時間を長くしたり、設定温度を高めにしてご使用ください。


ご使用例	使用前に 本体を温める時間	就寝時の温度設定
通常	設定温度「5」で 約1時間	設定温度「2～3」
使い始めにぬるく 感じる時	設定温度「5」で 約2～3時間	

あとかたづけ


本体

1 本体を3つ折りにする

- 折り曲げるときは、マッサージ面を内側にして、足元側、頭部側の順に3つ折りにしてください。
- ゆっくりと折り曲げてください。
- 電源コードは必ず束ねてください。

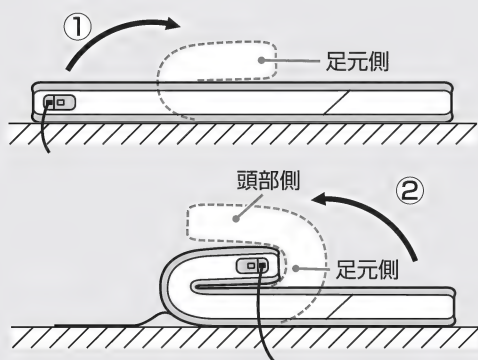

2 ベルトをかける

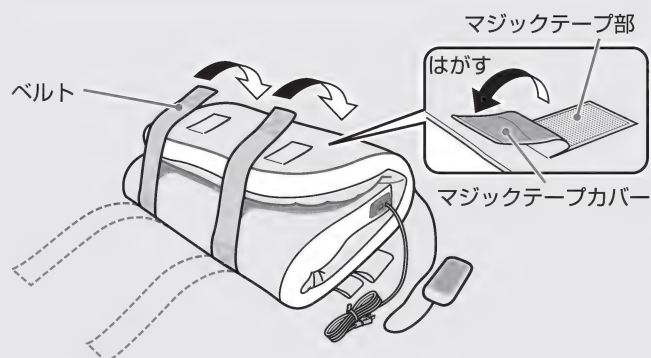

お願い

- 電源プラグやリモコンを本体の間に入れたまま折り曲げないでください。故障の原因になります。
- 足の上に落としたりしないように注意してください。

本体の移動のしかた

⚠ 注意



禁止

リモコンコード、電源コードに足を引っ掛けないように気をつける
けがのおそれがあります。

- 必ず本体は折りたたみ、ベルトを掛けた状態で移動してください。
- 本体の下側を2人で持って移動させてください。

お願い

- 移動中に運転しないでください。
- 電源コードは必ず束ねてください。
- 本体移動後は静かに設置してください。



お手入れ

本体カバーのお手入れ

注意 	禁止 脚枕、駆動部、制御部、バイブレータ、リモコンを踏みつけたり、腰掛けたりしない けがや破損・故障の原因になります。	禁止 本体を干す場合は、もの干し竿などに干さない 落下によるけがや故障の原因になります。
	禁止 ベンジン・シンナー・アルコールなどでふいたり、殺虫剤をかけない 感電や引火の原因になります。	プラグを抜く お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く また、濡れた手で抜き差ししない 感電やけがのおそれがあります。
	禁止 本体は、洗わない 故障や感電・火災の原因になります。	


●開梱時や長期間の収納後使用するとき、本体カバー表面の折り曲げ部に深いシワが発生する場合があります。広げた状態で使用することにより軽減されます。



●折れぐせが残っていることがありますが、使用することにより徐々に直ります。

●本体カバーの汚れは、中性洗剤または衣料専用のシミ抜き程度のものでブラシ洗浄したあと、水を含ませた布でふきとり、自然乾燥させてください。但し、使いすぎると布地を傷めることがあります。

- お願い**
- お手入れで汚れがとれない場合、本体カバーをはずし、ドライクリーニングをしてください。
 - 干す場合は、日の当たらない風通しの良い場所に広げて干してください。
 - ふとん乾燥機は、使用しないでください。

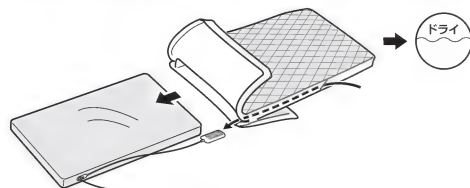

本体カバーのクリーニング ●本体カバーの汚れは、本体カバーをはずし、ドライクリーニングをしてください。

本体カバーのはずしかた

1 ファスナー①を②まで移動する
 ファスナーのフックをポケットから出します

2 リモコンを本体カバーの中に入れます

3 本体カバーを開き本体を引き抜く

本体カバーのつけかた

1 ファスナー①を下図の位置にしておく

2 本体に本体カバーをかぶせる

② リモコンを本体カバーの中から出します

③ 本体カバーをつけます

① 先だけたぐりよせます

3 ファスナー①を②までしめる
 ファスナーのフックをポケットに入れます

保 管


⚠ 注意



禁 止

脚枕、駆動部、制御部、バイブレータ、リモコンを踏みつけたり、腰掛けたりしない
けがや破損・故障の原因になります。

3つ折りにしてベルトを掛けて
保管してください。

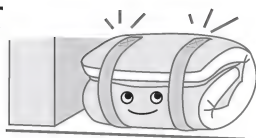

3つ折りにした本体に人や物を乗せたり、
腰掛けたりしないでください。


汚れやほこりをとった後、湿気
の少ない所に水平に置いて保管
してください。

(カビやシミ、故障の原因になりま
す。)



直射日光が当たる所、ストーブ
などの近くで直接高温になる所
はさけてください。

(布地の変色・変質の恐れがありま
す。)

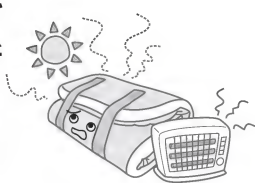

本体をひいたままで、長時
間そのままにしないでくだ
さい。

(カビ発生の原因になります。)



仕 様

品名	エアーマッサージ器		形名	DF-313	
類別	機械器具 77 バイブレーター				
一般的名称	家庭用電気マッサージ器（コード 34662000）				
医療機器認証番号	221AGBZX00246000				
定格	電源	AC100V 50/60Hz			
	定格時間	30分（エアーマッサージ・バイブレータ）			
	消費電力	125W	電気マッサージ器 68W		電熱器 75W
機能	「自動コース」：おやすみ前、おめざめ後、ゆったり				
	「お好みコース」：ひねり、ストレッチ				
	「脚枕」：脚枕単独コース、自動・お好みコース同時				
オートタイマー	マッサージ：約15分 ヒーター：約12時間				
エアーマッサージ強さ	「弱」「中」「強」				
脚枕	高さ：約 80 mm				
脚バイブレータ強さ	一定				
ヒーター温度調整	5段階調整				
ヒーターマット表面温度	約30℃（ヒーター設定温度「2」の場合）		約50℃（ヒーター設定温度「5」の場合）		
標準消費電力量（1時間当たり）	約30Wh（ヒーター設定温度「2」の場合）		約60Wh（ヒーター設定温度「5」の場合）		
発熱体	ビニール被覆式ヒーター				
素材	本体カバー 生地：ポリエステル100%（裏生地はウレタンフォームラミネート）			充填物 ウレタンフォーム	
寸法	約幅950mm×長さ2000mm×厚さ80mm				
質量（重さ）	約14kg				
電源コード	約2.3m		リモコンコード	約1.0m	
付属品	専用シート（CF-10PU）※消耗性部品				
製造販売元	名称：株式会社 フジ医療器				
	住所：大阪府南河内郡太子町太子2372-95				
	電話：0721-98-6870（代表）				
製造元	名称：東洋佳嘉（寧波）海綿制品有限公司（中国） Toyo Quality One Ningbo Co.,Ltd. (CHINA)				

修理サービスを依頼する前に

⚠ 警告



分解・改造・修理をしない
また、内部カバーのファスナーを開けない

分解禁止 火災や感電・けがの原因になります。

使用中に異常が生じたときは次の点をお調べください。

こんなとき	次の点をお調べください。	
動作しない	<ul style="list-style-type: none">●電源プラグが抜けていませんか。●本機の定格時間（30分）を超えて使用していませんか。●タイマーがはたらき、停止した状態になっていませんか。	<ul style="list-style-type: none">→電源プラグをコンセントに入れてください。 12→本体内部の保護装置がはたらいています。2時間程待ってから使用してください。 9→もう一度リモコン操作をしてください。 14
リモコンが正常に動作しない	<ul style="list-style-type: none">●電源の状態等により誤動作している可能性があります。	<ul style="list-style-type: none">→電源プラグを一旦コンセントから抜いてもう一度コンセントへ差込んでください。 12
ヒーターが暖かくない (ヒーターが入らない)	<ul style="list-style-type: none">●ヒーター 入/切 ボタンがオフになっていませんか。 (リモコンの 停止 ボタンを押すと、ヒーターがオフになります。)	<ul style="list-style-type: none">→ヒーター 入/切 ボタンを押してください。 20
動作時の音が気になる	<ul style="list-style-type: none">●マッサージ部位の切り替えのカチ音、エアーを排気するときのプシュー音、ポンプが動くときのブーン音です。	<ul style="list-style-type: none">→構造上発生するもので、機能などに影響ありません。

愛情点検



愛情点検

長年ご使用の場合は
点検をぜひ！

このような症状はありませんか。

- こげくさい臭いがする。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため本体の電源スイッチを「切」にし、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いたうえで、ご購入先または、お客様相談窓口までお問い合わせください。

⚠ 注意



しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常に動作することを確認してから使用する

確認する 事故やけがのおそれがあります。

MEMO

MEMO

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にご連絡ください

●保証書（別に添付してあります。）

お買い上げの際に保証書をご購入先からお受け取りになり「お買い上げ日」・「ご購入先名」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間 添付の保証書に記載

●補修用性能部品の保有期間

当社はこのエアーマッサー器の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

24ページに従ってしらべていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いたうえで、ご購入先にご連絡ください。

●保証期間中に修理を依頼される場合

ご購入先にご相談ください。保証書の記載内容に従って修理いたします。

（なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。）

●その他ご不明な場合

アフターサービスに関するご相談、ならびにご不明な点は、ご購入先または、お客様相談窓口までお問い合わせください。

●保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

まずご購入先にご相談ください。
修理により、製品機能が維持できる場合には、ご要望に従い有料にて修理いたします。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

お客様相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱いなどのご相談は、まずご購入先へご連絡ください。

0120 フリーダイヤル
0120-027612

受付：月曜～金曜 午前9時～午後5時30分

※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX・E-mailでの受付も行っております。

FAX番号 06-6644-9103

E-mail fj_soudansitu@fujiiryo.co.jp

FAX・E-mailでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

地球の環境保護の為、破棄するときにはそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしただけでください。



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大エビル14階

お客様へ…ご購入年月日・ご購入店名を記入されると便利です。

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	TEL

2009年9月5日（新様式第1版）